


# ЕЛЕКТРОЛАРИНГОФОН LABEX™ DIGITAL

## НАСТАНОВА З ВИКОРИСТАННЯ

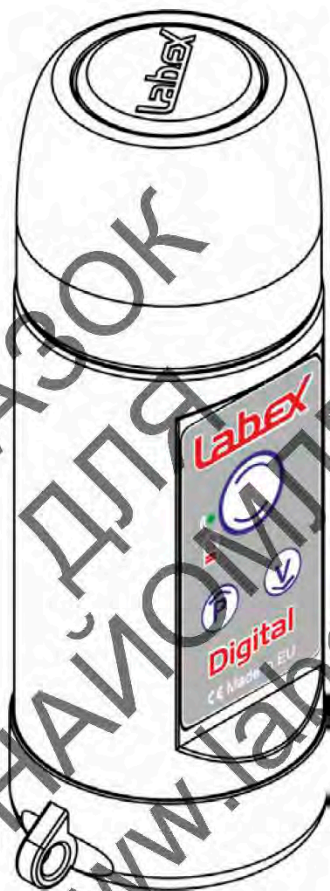

**TUV NORD**

ISO 9001 : 2015

TÜV NORD CERT GmbH

# 44 100 18 32 0020



## Огляд

### 1. Що таке Labex Digital

Labex Digital це цифровий електроларингофон. Він спеціально розроблений, щоб допомогти спілкуватися людям після ларингектомії.

### 2. Компоненти та панель керування

Labex Digital складається з декількох основних компонентів:

1) Верхня головка - частина, яку ви притискаєте до шиї.

2) Кнопка START - головна кнопка. Натискайте її для генерування звуку.

3) Кнопка ВГОРУ (P) - використовується для налаштувань.

4) Кнопка ВНИЗ (V) - використовується для налаштувань.

5) Індикатор LED - загоряється при натисканні кнопки START.

6) Індикатор батареї - загоряється, коли слідє замінити батарею.

7) Кришка батареї - закриває секцію батареї.



**Зауваження:** Кнопки вашого приладу достатньо чутливі. Для спрацювання достатньо зусилля в 160г. Будь-ласка, утримуйтеся від надмірних зусиль при натисканні. Це може призвести для поломки вашого пристрою.

### 3. Комплектація

В коробці ви знайдете все, що буде потрібно для початку використання приладу:

- Голосовідтворюючий прилад Labex Digital
- 2 Li-Io перезаряджаємі батареї на 9В
- Двох-слотовий зарядний пристрій
- Labex-стрічка для носіння
- Настанови користувача
- Гарантійна картка

### Починаємо використання


#### 4. Встановлення батареї

- а. По-перше, потрібно встановити батарею. Візьміть одну з двох батарей, зніміть захисну пластикову плівку.
- б. Відкрутіть кришку батареї з нижньої частини приладу.
- в. Встановіть батарею в батарейний відсік, дотримуючись полярності. Позначки "+" та "-" на батареї на всередині приладу мають збігатися.
- г. Накрутіть кришку на нижню частину приладу.

**Увага:** Якщо ви приєднаєте батарею не правильно, ваш прилад не пошкодиться. Просто не буде працювати.

#### 5. Пошук "золотої" точки

"Золота" точка дозволить звуку від приладу передаватись через шию та ротову порожнину найбільш чітко. Найпростіший шлях знайти вашу точку, це притискати площину звукової головки до шиї в різних місцях та одночасно натискати кнопку START. Все, що ви шукаєте, це місце на шиї, як найкраще передає звук. Шукаючи вашу "золоту" точку, важливо щільно притискали прилад до шкіри шиї, щоб звук як найкраще

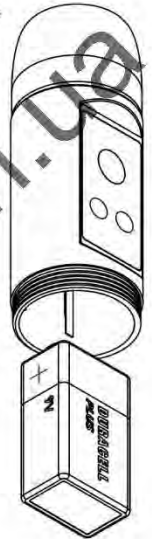

Labex Digital Настанова з використання -4 проходив тканини тіла, а потім і ротову порожнину. Приділіть ваш час на пошук "золотої" точки - це без перебільшень найважливіший момент навчання використання голосовідтворюючого пристрою. Якщо ви знайдете найкраще місце, вас чекає успіх.

## 6. Перші слова

Після того, як ви знайшли бажану точку, ви можете починати робити деякі базові звуки. Спочатку зосередьтесь на поодиноких голосних звуках. Дуже чітко промовляйте кожен звук ротом, поки не відчуєте себе комфортно з усіма голосними. Після цього можете починати практикуватись з короткими словами. Не поспішаючи рухайтесь на шляху до речень та спілкування.

## 7. Очікування

Навчитися розмовляти з голосовідтворюючим апаратом непросто. Підходьте до цього як до навчання гри на музичному інструменті. На це знадобиться час, практика та терпіння. Починайте з найпростішого і працюйте над собою.

## НАЛАШТУВАННЯ

### 8. Як змінити гучність

Для налаштування гучності приладу виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть та утримуйте кнопку ВНИЗ доки прилад не зазвучить.
- 2) Коли пристрій почне гудіти, відпустіть кнопку. Пристрій повинен постійно гудіти, не натискаючи жодної кнопки.
- 3) За допомогою кнопок ВВЕРХ та ВНИЗ змінюйте гучність приладу.
- 4) При досягненні бажаного рівня, натисніть кнопку START. Прилад автоматично збереже поточний рівень гучності.

## 9. Як змінити тон

Для налаштування тону приладу виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть та утримуйте кнопку ВВЕРХ доки прилад не зазвучить.
- 2) Коли пристрій почне гудіти, відпустіть кнопку. Пристрій повинен постійно гудіти, не натискаючи жодної кнопки.
- 3) За допомогою кнопок ВВЕРХ та ВНИЗ змінюйте тон приладу.
- 4) При досягненні бажаного тону, натисніть кнопку START. Прилад автоматично збереже поточний тон звучання.

## 10. Як скинути всі налаштування до заводських

Якщо ви вирішили повернути налаштування гучності/тону приладу до заводських значень, виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть та утримуйте одночасно всі три кнопки.
- 2) Почне спалахувати червоний індикатор батареї. Утримуйте нажатими все кнопки доки, доки червоний індикатор батареї перестане спалахувати та засвітиться постійно.
- 3) Коли червоний індикатор батареї почне постійно світитися, відпустіть всі кнопки та зачекайте 3-4 секунди. Всі налаштування будуть відновлені до заводських.

## БАТАРЕЯ

### 11. Стан розряду батареї

Ваш Labex™ має двох-ступінчасту індикацію рівня заряду батареї. Коли лишилося 20% рівня заряду батареї, індикатор буде спалахувати протягом 3-х секунд після кожного відпускання кнопки START (2). Коли лишилося 10% рівня заряду батареї, індикатор буде постійно горіти протягом 3-х секунд після відпускання START (2). Це свідчить про необхідність замінити батарею.

## 12. Які батареї підходять

В комплекті з вашим Labex Digital йдуть дві перезаряджає мі батареї. Це дозволить вам завжди мати під рукою свіже заряджену батарею. Окрім того, Labex Digital сумісний з усіма 9-вольтовими батареями (типа "крона") на ринку - як звичайними батареями, так і перезаряджаємими.

## 13. Зарядження батареї

Разом з вашим Labex ви отримуєте дві Li-Ion батареї та двох-слотовий «розумний» зарядний пристрій. «Розумний» зарядний пристрій заряджає ваші батареї до повної ємності та гарантує довгий термін експлуатації. Цей зарядний пристрій ніколи не призведе до надмірної зарядки ваших батареї.

Для зарядки батареї виконуйте наступні дії:

- 1) Встановіть батарею у вільний слот зарядного пристрою, не забуваючи про полярність.
- 2) Витягніть мережеві пластини та встановіть на них мережевий адаптер.
- 3) Приєднайте пристрій до мережі 220В. Відразу загориться світовий індикатор, що свідчить про початок процесу заряду.
- 4) Коли батарея буде повністю заряджена, індикатор погасне і процес зарядки припиниться автоматично.
- 5) Від'єднайте зарядний пристрій від мережі 220В та зніміть батарею.

**УВАГА:** Ніколи не заряджайте інші типи батареї окрім Li-Io батареї в цьому зарядному пристрої. *Спроба встановити в зарядний пристрій інших типів батареї призведе до поломки зарядного пристрою.*

**Примітка:** Вважається нормальним нагрів зарядного пристрою під час зарядки батареї.

## Догляд за ВАШИМ ПРИСТРОЄМ

### 14. Як чистити прилад

Для чищення пристрою використовуйте м'яку тканину або серветки з мікрофібри з невеликою кількістю води або рідини для чищення вікон. Обережно протирайте зовнішню частину пристрою.

### 15. Стійкість до вологи

Labex Digital витримує використання під дощем або миття мокрою ганчіркою. Однак занурення пристрою у воду пошкодить пристрій і позбавить вас гарантії.

## ІНФОРМАЦІЯ

### 16. Гарантія

Всі прилади Labex поставляються з обмеженою 2-річною гарантією. Обмежена гарантія поширюється на всі види відмов роботи приладу при нормальній експлуатації, окрім тих, що зазначені нижче. Гарантія втрачається у випадку втручання в прилад неавторизованої сторони або при некоректному використанні приладу.

**Ця Обмежена Гарантія не покриває** будь які проблеми, пов'язані з:

- Умовами, несправностями або руйнуваннями, що не пов'язані з якістю матеріалів та виробництва.
- Що виникли у зв'язку з недбалістю, неналежним користуванням або модифікацією.
- Поломки, що виникли в результаті природних явищ, включно, але не обмежено, з блискавкою, повінню, та інші природні лиха.
- Крадіжка або втрата.

Користувач сплачує витрати на транспортування приладу до LabexTradeLtd.

### 17. Контактна інформація



**LABEX TRADE LTD.**

59 Sankt Peterburg Blvd., Fl. 6, Off. 604  
4017 Plovdiv, Bulgaria, European Union  
T: +359 32 54 9090,  
M: +359 878 616 711

**Представник:**

ТОВ Хелс трейдинг МН  
Бородянський  
провулок 3  
м.Київ  
e-mail: magerkiev@gmail.com  
Тел - +380 67 750 2844



## 18. Технічна специфікація

Загальні дані:	
Регулювання тону	Так
Регулювання гучності	Так
Розмовна кнопка	1
Кнопки для налаштувань	2
Діапазон частот	55 - 155 Гц
Діапазон гучності	60-83 дБ
Час розмов	До 4 год. від повного заряду
Фізичні параметри:	
Діаметр x Довжина	Ø34 x 98 мм
Вага	72г без батареї
Пило / Волого-стійкість	Так
Батарея:	
Ємність	600 мАг
Тип	Перезаряджаєма 9V6F22 Li-Ion
Кількість в комплекті	2 шт
Ресурс батареї	Більше 500 циклів
Зарядний пристрій	2 слоти 9V Li-Ion
Час заряджання від 0 до 100%	4 г. 30 хв. з зарядним від Labex
Захист	Смарт електронік