


# ЕЛЕКТРОЛАРИНГОФОН LABEX™ COMFORT

## НАСТАНОВА З ВИКОРИСТАННЯ

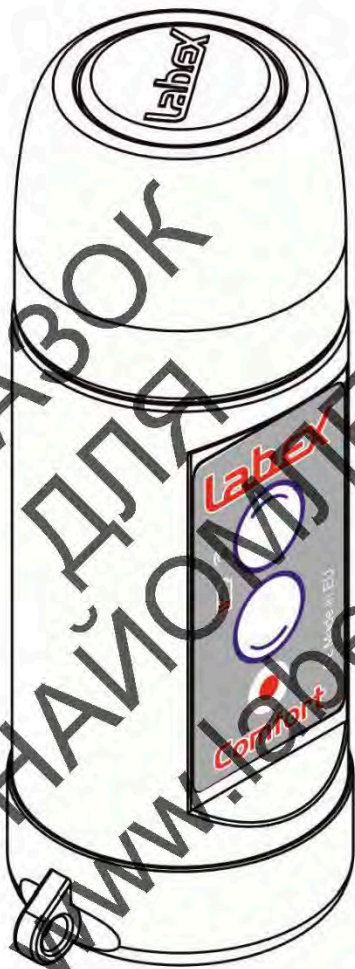

**TUV NORD**

ISO 9001 : 2015

TÜV NORD CERT GmbH

# 44 100 18 32 0020



## Огляд

### 1. Що таке Labex Comfort

Labex Comfort це цифровий електроларингофон. Він спеціально розроблений, щоб допомогти спілкуватися людям після ларингектомії. Його головна особливість – це дві керовані кнопки для розмови.

### 2. Компоненти та панель керування

Labex Comfort складається з декількох основних компонентів:

1) Верхня головка – частина яку ви притискаєте до шиї.

2) Розмовна кнопка 1 – верхня розмовна кнопка, з її допомогою можна змінювати гучність і тон.

3) Розмовна кнопка 2 – нижня розмовна кнопка, з її допомогою можна змінювати гучність і тон.

4) Кнопка для налаштування використовується для зміни параметрів.

5) Індикатор LED - загоряється при натисканні однієї з двох розмовних кнопок.

6) Індикатор батареї – загоряється, коли слідє замінити батарею.

7) Кришка батареї - закриває секцію батареї.

**Зауваження:** Кнопки вашого приладу достатньо чутливі. Для спрацювання достатньо зусилля в 160г. Будь-ласка, утримуйтеся від надмірних зусиль при натисканні. Це може призвести до поломки вашого пристрою.



### 3. Комплектація

В коробці ви знайдете все, що буде потрібно для початку використання приладу:

- Голосовідтворюючий прилад Labex Comfort
- 2 Li-Io перезаряджаємі батареї на 9В
- Двослотовий зарядний пристрій
- Labex-стрічка для носіння
- Настанова користувача
- Гарантійна картка

### ПОЧИНАЄМО ВИКОРИСТАННЯ


#### 4. Встановлення батареї

- а. По-перше, потрібно встановити батарею. Візьміть одну з двох батарей, зніміть захисну пластикову плівку.
- б. Відкрутіть кришку батареї з нижньої частини приладу.
- в. Встановіть батарею в батарейний відсік, дотримуючись полярності. Позначки "+" та "-" на батареї та всередині приладу мають збігатися.
- г. Накрутіть кришку на нижню частину приладу.

**Увага:** Якщо ви приєднаєте батарею не правильно, ваш прилад не пошкодиться. Просто не буде працювати.

#### 5. Пошук "золотої" точки.

"Золота" точка дозволить звуку від приладу передаватись через шию та ротову порожнину найбільш чітко. Найпростіший шлях знайти вашу точку, це притискати площину звукової головки до шиї в різних місцях та одночасно натискати одну з двох розмовних кнопок. Все, що ви шукаєте, це місце на шиї, яке найкраще передає звук. Шукаючи вашу "золоту" точку, важливо щільно притискали прилад до шкіри шиї, щоб звук як найкраще проходив тканини тіла, а потім і ротову порожнину. Приділіть ваш час на пошук "золотої" точки - це без перебільшень найважливіший момент навчання використання голосовідтворюючого пристрою. Якщо ви знайдете найкраще місце, вас чекає успіх.

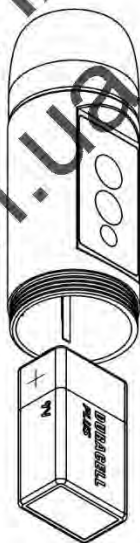

## 6. Перші слова

Після того, як ви знайшли бажану точку, ви можете починати робити деякі базові звуки. Спочатку зосередьтесь на поодиноких голосних звуках. Дуже чітко промовляйте кожен звук ротом, поки не відчуєте себе комфортно з усіма голосними. Після цього можете починати практикуватись з короткими словами. Не поспішаючи рухайтесь на шляху до речень та спілкування.

## 7. Очікування

Навчитися розмовляти з голосовідтворюючим апаратом непросто. Підходьте до цього як до навчання гри на музичному інструменті. На це знадобиться час, практика та терпіння. Починайте з найпростішого і працюйте над собою.

## НАЛАШТУВАННЯ

### 8. Як змінити гучність

Ви можете коригувати гучність кожної кнопки окремо. Для налаштування гучності приладу виконайте наступні дії:

- Натисніть та утримуйте одну з двох розмовних кнопок доки прилад не зазвучить.
- Під час утримання бажаної розмовної кнопки, натисніть та утримуйте кнопку для налаштування.
- Утримуйте обидві кнопки. Звук припиниться, і червоний світлодіод почне спалахувати.
- Після декількох секунд пристрій почне гудіти. Відпустіть усі кнопки. Тепер пристрій у "Режимі налаштування гучності".
- Зараз ви можете використовувати розмовну кнопку 1 для збільшення гучності, або розмовну кнопку 2 для зменшення гучності.
- Коли ви досягнете бажаної гучності, натисніть кнопку для налаштування для підтвердження. Прилад автоматично збереже вашу бажану гучність.

**Зауваження:** Ви можете вибрати різну гучність для кожної розмовної кнопки.

### 9. Як змінити тон

Ви можете коригувати тон кожної кнопки окремо. Для налаштування тону приладу виконайте наступні дії:

## Labex Comfort Настанова з використання, # 5

- Натисніть та утримуйте кнопку для налаштування.
- Під час утримання кнопки для налаштування, натисніть та утримуйте розмовну кнопку, для якої ви бажаєте змінити тон (розмовна кнопка 1 або розмовна кнопка 2).
- Утримуйте обидві кнопки. Звук припиниться, і червоний світлодіод почне спалахувати.
- Після декількох секунд, пристрій почне гудіти. Відпустіть усі кнопки. Тепер пристрій у “Режимі налаштування тону”.
- Зараз ви можете використовувати розмовну кнопку 1 для збільшення тону, або розмовну кнопку 2 для зменшення тону.
- Коли ви досягнете бажаного тону, натисніть кнопку для налаштування для підтвердження. Прилад автоматично збереже ваш бажаний тон.

**Зауваження:** Ви можете вибрати різний тон для кожної розмовної кнопки.

### 10. Як скинути всі налаштування до заводських

Якщо ви вирішили повернути налаштування гучності/тону приладу до заводських значень, то виконайте наступні дії:

- 1) Натисніть та утримуйте одночасно всі три кнопки (розмовна кнопка 1, розмовна кнопка 2 та кнопка для налаштування).
- 2) Почне спалахувати червоний індикатор батареї. Утримуйте натиснутими всі кнопки доти, доки червоний індикатор батареї перестане спалахувати та засвітиться постійно.
- 3) Коли червоний індикатор батареї почне постійно світитися, відпустіть всі кнопки та зачекайте 3-4 секунди. Всі налаштування будуть відновлені до заводських.

## БАТАРЕЯ

### 11. Стан розряду батареї

Ваш Labex™ має двохступінчасту індикацію рівня заряду батареї. Коли лишилося 20% рівня заряду батареї, індикатор буде спалахувати протягом 3-х секунд після кожного відпускання будь-якої розмовної кнопки. Коли лишилося 10% рівня заряду батареї, індикатор буде постійно горіти протягом 3-х секунд після відпускання будь-якої з розмовних кнопок. Це свідчить про необхідність замінити батарею.

## 12. Які батареї підходять

В комплекті з вашим Labex Comfort йдуть дві перезаряджаємі батареї. Це дозволить вам завжди мати під рукою свіже заряджену батарею. Окрім того, Labex Comfort сумісний з усіма 9-вольтовими батареями (типа "крона") на ринку - як звичайними батарейками, так і перезаряджаємими.

## 13. Зарядження батарей

Разом з вашим Labex ви отримуєте дві Li-Io батареї та двох-слотовий «розумний» зарядний пристрій. «Розумний» зарядний пристрій заряджає ваші батареї до повної ємності та гарантує довгий термін експлуатації. Цей зарядний пристрій ніколи не призведе до надмірної зарядки ваших батарей.

Для зарядки батарей виконуйте наступні дії:

- 1) Встановіть батарею у вільний слот зарядного пристрою, не забуваючи про полярність.
- 2) Витягніть мережеві пластини та встановіть на них мережевий адаптер.
- 3) Приєднайте пристрій до мережі 220В. Відразу загориться світловий індикатор, що свідчить про початок процесу заряду.
- 4) Коли батарея буде повністю заряджена, індикатор погасне і процес зарядки припиниться автоматично.
- 5) Від'єднайте зарядний пристрій від мережі 220В та зніміть батарею.

**Увага:** Ніколи не заряджайте інші типи батарей окрім Li-Ion батарей в цьому зарядному пристрої. *Спроба вст ановит и в зарядний прист рій інших т ипів бат арей призведе до поломки зарядного прист рою.*

**Примітка:** Вважається нормальним нагрів зарядного пристрою під час зарядки батарей.

## Догляд за вашим пристроєм

### 14. Як чистити прилад

Для очищення пристрою використовуйте м'яку тканину або серветки з мікрофібри з невеликою кількістю води або рідини для чищення вікон. Обережно протирайте зовнішню частину пристрою.

## 15. Стійкість до вологи

Labex Comfort витримує використання під дощем або миття мокрою ганчіркою. Однак занурення пристрою у воду пошкодить пристрій і позбавить вас гарантії.

## ІНФОРМАЦІЯ

### 16. Гарантія

Всі прилади Labex поставляються з обмеженою 2-річною гарантією. Обмежена гарантія поширюється на всі види відмов роботи приладу при нормальній експлуатації, окрім тих, що зазначені нижче. Гарантія втрачається у випадку втручання в прилад неавторизованої сторони або при некоректному використанні приладу.

**Ця Обмежена Гарантія не покриває** будь які проблеми, пов'язані з:

- Умовами, несправностями або руйнуваннями, що не пов'язані з якістю матеріалів та виробництва.
- Що виникли у зв'язку з недбалістю, неналежним користуванням або модифікацією.
- Поломки, що виникли в результаті природних явищ, включно, але не обмежено, з блискавою, повінню, та інші природні лиха.
- Крадіжка або втрата.

Користувач сплачує витрати на транспортування приладу до LabexTradeLtd

Більш детальна інформація в гарантійній картці.

### 17. Контактна інформація



#### **LABEX TRADE LTD.**

59 SanktPeterburg Blvd., Fl. 6, Off. 604

4017 Plovdiv, Bulgaria, European Union

T: +359 32 54 9090,

M: +359 878 616 711

#### **Представник:**

**ТОВ Хелс трейдинг МН**

Бородянський провулок 3

м.Київ

e-mail: magerkiev@gmail.com

Тел - +380 67 750 2844



## 18. Технічна специфікація

Загальні дані:	
Регулювання тону	Так
Регулювання гучності	Так
Розмовна кнопка	2
Кнопки для налаштувань	1
Діапазон частот	55 - 155 Гц
Діапазон гучності	60-83 дБ
Час розмов	До 4 год. від повного заряду
Фізичні параметри:	
Діаметр x Довжина	Ø34 x 98 мм
Вага	72г без батареї
Пило / Волого-стійкість	Так
Батарея:	
Ємність	600 мАг
Тип	Перезаряджаема 9V6F22 Li-Ion
Кількість в комплекті	2 шт
Ресурс батареї	Більше 500 циклів
Зарядний пристрій	2 слоти 9V Li-Ion
Час заряджання від 0 до 100%	4 г. 30 хв. з зарядним від Labex
Захист	Смарт електронік